






# I-M-O-N METHODOS

EL

Εργαστηριακό τεστ  
εξετάσεων I-M-O-N KIT

## Οδηγίες Δειγματοληψίας Ξηράς Κηλίδας Αίματος

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Σακουλάκι αλουμινίου που περιέχει την κάρτα δειγματοληψίας (α). 
- Μία κάρτα δειγματοληψίας με 2 υποδοχείς δειγματοληψίας (β). 
- Σκαρφιστήρας μίας χρήσης (γ) 
- Αυτοκόλλητος επίδεσμος (δ). 
- Φόρμα πληροφοριών και KIT συσκευασίας (ε). 

### ➔ ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ:


**1.** Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά με ζεστό νερό και σαπούνι.



**2.** Καθίστε αναπαυτικά σε μία καρέκλα, με τα χέρια σας κάτω. Ανακινήστε τα ελαφρά για να βοηθήσετε στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.



**3.** Ανοίξτε προσεκτικά το σακουλάκι αλουμινίου (α) και αφαιρέστε την συσκευή δειγματοληψίας capitainer B (β). Ανοίξτε το καπάκι της κάρτας και τοποθετήστε την στο τραπέζι μπροστά σας. Παρακαλείσθε ΝΑ ΜΗΝ αγγίζετε τους υποδοχείς δειγματοληψίας της κάρτας.

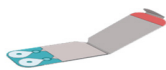

**4.** Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας μίας χρήσης (γ). Επιλέξτε είτε το μέσο είτε το παράμεσο δάχτυλο για να τρυπήσετε με το σκαρφιστήρα.



**5.** Πιέστε το δάχτυλό σας με τον αντίχειρά σας για να βοηθήσετε το δάχτυλό σας να γεμίσει με αίμα. Για να το ενεργοποιήσετε πιέστε το προσεκτικά στο άκρο του δαχτύλου σας




**6.** Απελευθερώστε από την ασκούμενη πίεση και περιμένετε να εμφανιστεί το αίμα. Σκουπίστε την πρώτη σταγόνα.




**7.** Αφήστε να σχηματιστεί μια ΝΕΑ, ΜΕΓΑΛΗ σταγόνα αίματος. Περιμένετε να πέσει η σταγόνα λόγω της βαρύτητας

στον στον στρόγγυλο υποδοχέα της κάρτας δειγματοληψίας (β).

Εφαρμόστε μόνο **ΜΙΑ** σταγόνα!

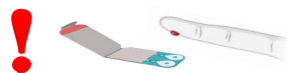

**8.** Επαναλάβετε το βήμα 7, ώστε να γεμίσετε το δεύτερο υποδοχέα δειγματοληψίας (β).

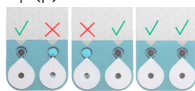

**9.** Σκουπίστε το αίμα με ένα χαρτομάντηλο και εφαρμόστε τον αυτοκόλλητο επίδεσμο (δ) στην άκρη του δαχτύλου.



**10.** Ελέγξτε εάν η δειγματοληψία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Α) Το παράθυρο ελέγχου ( βέλος) θα πρέπει να είναι γεμάτο με αίμα. Β) Επιπλέον επιβεβαιώστε ότι περιέχουν αίμα και οι δύο υποδοχείς, κοιτώντας την πίσω πλευρά της κάρτας. Εάν ναι, κλείστε το καπάκι της κάρτας.



**11.** Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στη συνημμένη φόρμα (ε) και επιστρέψτε την κάρτα στο εργαστήριο.



➔ **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΟΥΤΙ** του ΚΙΤ σας για να συσκευάσετε το δείγμα σας και να το στείλετε πίσω.



Χρησιμοποιήστε την επιλογή προπληρωμένης παράδοσης μέσω κούριερ στην περιοχή σας (βρείτε λεπτομέρειες στο I-M-O-N box) & στείλτε το στη διεύθυνση:  
**ANALYSIS LAB**  
Τσιμισκή 51, ΤΚ: 54623,  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ  
Τηλ: +30 2310 256388, +30 2310 227089  
E-mail: [analysisi@analysisi.gr](mailto:analysisi@analysisi.gr)

### ➔ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

- Μόλις ολοκληρώσετε σωστά την όλη διαδικασία, επικοινωνήστε μαζί μας - ΑΥΣΤΗΡΑ εντός 24ωρου- προκειμένου να στείλουμε το συνεργαζόμενο κούριερ στο μέρος που σας εξυπηρετεί καλύτερα και κατά την ώρα που θα μας υποδείξετε, ώστε να παραλάβει το κουτί με το δείγμα προς εξέταση.

➔ **ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ** με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους

**E-Mail** : [info@ismadeofnature.com](mailto:info@ismadeofnature.com)

**Viber** : +306934831964

**What's up** : +306934831964

τα ακόλουθα στοιχεία σας : Όνομα, Διεύθυνση, Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και το μέρος και την ώρα που θα στείλουμε το συνεργαζόμενο κούριερ

**ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ!!!**

Ευχαριστούμε!






# I-M-O-N METHODOS

EN

Lab Test I-M-O-N KIT

## Dry Blood Spot (DBS) Sampling Instructions

### CONTENT

- Aluminum foil bag containing the sampling card (a). 
- One sampling card with 2 sampling wells (b). 
- Disposable lancet (c). 
- Adhesive bandage (d). 
- Information form & package kit (e). 

### STEP BY STEP INSTRUCTIONS:

- 1.** Wash your hands meticulously with warm water and soap.



- 2.** Sit down comfortably in a chair, with your hands down. Shake them slightly in order to help better blood circulation.



- 3.** Open carefully the aluminum foil bag (a) and remove the CapitainerB sampling device (b). Open the lid of the card and place it down on the table in front of you. Please do NOT touch the sampling wells of the card.



- 4.** Remove the protective cover of the disposable lancet (c). Choose either middle or ring finger to prick with the lancet.




- 5.** Press your finger with your thumb to help your fingertip be filled with blood. Carefully press the lancet against your fingertip to activate the lancet.



- 6.** Release the applied pressure and wait for the blood to appear. Wipe off the first drop.




- 7.** Let a NEW, LARGE drop of blood to form.

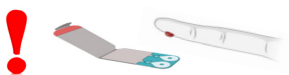

Wait for the drop to fall of due to gravity in to the one sampling well (b).

Apply only ONE drop!

- 8.** Repeat step 7, and fill the second sampling well (b).

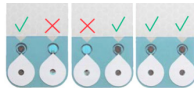

- 9.** Wipe the blood with a tissue and apply the adhesive bandage (d) in the fingertip.



- 10.** Please check if the sampling was completed successfully : A) The control window (arrow) should be filled with blood. B) Check that the two sampling wells contain blood, by looking the back-cover of the card. If so, close the lid of the card.



- 11.** Please fill all the necessary information in the enclosed form (e) and return the card to the laboratory.



- USE THE SMALL BOX** of your KIT to package your Sampling specimens and send it back to our Lab.



### ANALYSIS LAB

Tsimiski 51, PC: 54623,

THESSALONIKI, GREECE

Tel: +30 2310 256388, +30 2310 227089

E-mail: [analysis@analysis.gr](mailto:analysis@analysis.gr)

### WAYS OF SENDING YOUR SAMPLING

- As soon as you execute correctly the whole procedure, come in contact with us- STRICTLY within 24h - in order to sent our courier at the time and place best suits you to collect your specimens.

### SEND US using one of the following

E-Mail : [info@ismadeofnature.com](mailto:info@ismadeofnature.com)

Viber : +306934831964

What's up : +306934831964

Your : Name, Address, Mobile Phone and also the day and hour best suits you to book an appointment with our courier partner

**BE SURE WE HAVE RECEIVE YOUR DETAILS BY RESPONDING TO YOUR MESSAGE**

Thank you!

I-M-O-N  
METHODOS

<https://capitainer.com/how-to-use/>  
<https://imonmed.com/services/labtests/>