

I-M-O-N METHODOS

EL

Εργαστηριακό τεστ
εξετάσεων I-M-O-N ΚΙΤ
**Οδηγίες Δειγματοληψίας
Στοματικού επιχρίσματος
DNA**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


- 2 δειγματολήπτες στοματικού επιχρίσματος σε μπατονέτες βαμβακιού σε σωληνάρια (α) & (β).



- Φόρμα πληροφοριών (γ)



- ΚΙΤ συσκευασίας (ε).

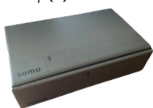

➔ ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ:

1 α) Πάρτε δείγμα DNA τουλάχιστον μία ώρα μετά το φαγητό, το ποτό, το κάπνισμα, την μάσηση τσίχλας, το βούρτσισμα των δοντιών σας ή την χρήση στοματικού διαλύματος.

β) Ξελύετε το στόμα με ζεστό νερό 10 λεπτά πριν ταμponάρετε.



2 Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά με ζεστό νερό και σαπούνι.



3 Τραβήξτε για να ανοίξετε το σωληνάριο με τις αποστειρωμένες μπατονέτες για στοματικό επιχρίσμα (α) & (β). Αφαιρέστε τις μπατονέτες από τον σωλήνα, προσέχοντας να μην αγγίξετε την κεφαλή λευκής μπατονέτας με τα δάχτυλα σας.



4 Τοποθετήστε προσεκτικά την βαμβακερή κεφαλή της μπατονέτας στο μάγουλό σας. Τοποθετήστε την άκρη της μπατονέτας στο στόμα σας και τρίψτε στην εσωτερική πλευρά από το μάγουλό σας - πάνω - κάτω- περίπου 6 φορές και έως 1 λεπτό

! ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ξύστε δυνατά, αλλά όχι σε σημείο που να πονάει.



I-M-O-N
METHODOS
https://www.youtube.com/watch?v=IiUC_xF-yV8
<https://imonmed.com/services/labtests/>

5 Μόλις τελειώσετε, φροντίστε να μην αγγίξετε το άκρο της μπατονέτας σε άλλη επιφάνεια εκτός από το εσωτερικό του στόματός σας και το εσωτερικό του ειδικού πλαστικού σωλήνα. Τοποθετήστε το άκρο της μπατονέτας στον ειδικό σωλήνα. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στον σωλήνα.



6 Για να βελτιώσετε την ποσότητα του DNA που ανακτήθηκε, πάρτε ένα επιπλέον δείγμα από διαφορετική πλευρά του στόματος ή πάρτε το με διαφορά πολλών ωρών.



7 Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στη συνημμένη φόρμα (γ).

Τοποθετήστε την φόρμα μέσα στο κουτί συσκευασίας και επιστρέψτε την στο εργαστήριο μαζί με τους σωληνάρια δείγματος DNA



➔ **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΟΥΤΙ** του ΚΙΤ σας για να συσκευάσετε το δείγμα σας και να το στείλετε πίσω.



Χρησιμοποιήστε την επιλογή προπληρωμένης παράδοσης μέσω κούριερ στην περιοχή σας (βρείτε λεπτομέρειες στο I-M-O-N box) & στείλτε το στη διεύθυνση:

ANALYSIS LAB
Τσιμισκή 51, ΤΚ: 54623,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: +30 2310 256388, +30 2310 227089
E-mail: analysisi@analysisi.gr

➔ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

- Μόλις ολοκληρώσετε σωστά την όλη διαδικασία, επικοινωνήστε μαζί μας - ΑΥΣΤΗΡΑ εντός 24ωρου- προκειμένου να στείλουμε το συνεργαζόμενο κούριερ στο μέρος που σας εξυπηρετεί καλύτερα και κατά την ώρα που θα μας υποδείξετε, ώστε να παραλάβει το κουτί με το δείγμα προς εξέταση.

➔ **ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ** με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους

E-Mail : info@ismadeofnature.com

Viber : +306934831964

What's up : +306934831964

τα ακόλουθα στοιχεία : Όνομα, Διεύθυνση, Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και το μέρος και την ώρα που θα στείλουμε το συνεργαζόμενο κούριερ

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ!!!

Ευχαριστούμε!

I-M-O-N METHODOS

EN

Lab Test I-M-O-N KIT

Buccal Swab DNA Sampling Instructions

CONTENT


- 2 Sampling buccal swab cotton buds in tubes (a) & (b).



- Information form (c)



- package kit (d).

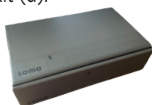

STEP BY STEP INSTRUCTIONS:

- 1 a)** Take your DNA sample at least one hour after eating, drinking, smoking, chewing gum, brushing your teeth, or using mouthwash.
b) Rinse the mouth with warm water ten minutes before swabbing



- 2** Wash your hands meticulously with warm water and soap.



- 3** Pull to open the tube with the sterilized buccal cotton swabs (a) & (b). Remove the buccal cotton buds from the tube, taking care not to touch the white swab head with your fingers



- 4** Carefully insert the cotton head of the swab to your cheek. Place the swab tip in your mouth and rub the side of your inner cheek - up and down- about 6 times and for up to one minute.

- ! **ATTENTION!!! Scrape vigorously, but not to the point that it hurts.**



- 5** Once finished, be sure not to touch the end of the swab to any surface other than the inside of your mouth and the inside of the special plastic tube. Place the swab tip into the opened tube. Put the cap back on the tube.



- 6** To improve the amount of DNA retrieved, take an extra sample from a different side of the mouth or take it several hours apart.



- 7** Please fill in all the necessary information in the enclosed form (c). Put the form inside the packaging box and return it to the laboratory along with the DNA specimen tubes



- USE THE SMALL BOX of your KIT** to package your Sampling specimens and send it back to our Lab.



ANALYSIS LAB
Tsimiski 51, PC: 54623,
THESSALONIKI, GREECE
Tel: +30 2310 256388, +30 2310 227089
E-mail: analysi@analysi.gr

WAYS OF SENDING YOUR SAMPLING

- As soon as you execute correctly the whole procedure, come in contact with us- STRICTLY within 24h - in order to sent our courier at the time and place best suits you to collect your specimens.

SEND US using one of the following
E-Mail : info@ismadeofnature.com
Viber : +306934831964
What's up : +306934831964

Your : Name, Address, Mobile Phone and also the day and hour best suits you to book an appointment with our courier partner

BE SURE WE HAVE RECEIVE YOUR DETAILS BY RESPONDING TO YOUR MESSAGE

Thank you!

I-M-O-N
METHODOS

https://www.youtube.com/watch?v=IUC_xF-yV8
<https://imonmed.com/services/labtests/>