

I-M-O-N METHODOS

EL

Εργαστηριακό τεστ
εξετάσεων I-M-O-N KIT


Οδηγίες Δειγματοληψίας Κοπράνων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


- 2 δοχεία συλλογής δειγμάτων με δοσομετρική (α)
- σακούλα συλλογής (β)
- φάκελος επικίνδυνων βιολογικών αποβλήτων (γ)
- φόρμα πληροφοριών (δ)
- κουτί συσκευασίας (ε)



μή πλήρωσης. Βιδώστε το καπάκι του δοχείου αρκετά σφικτά ώστε το υγρό να παραμείνει στο δοχείο και να μην ξεχειλίζει ή στάζει.

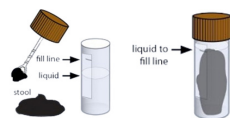

- 6** Μόλις ολοκληρωθεί η συλλογή του δείγματος, τοποθετήστε το μέσα στον φάκελο επικίνδυνων βιολογικών αποβλήτων (γ), και τοποθετήστε τον στο κουτί συσκευασίας (ε)

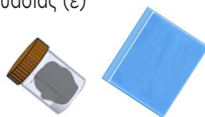

- 7** Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην συνημμένη φόρμα (δ). Τοποθετήστε την φόρμα στο κουτί συσκευασίας και επιστρέψτε το στο εργαστήριο μαζί με το δοχείο δείγματος κοπράνων



➔ ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ:

- 1.** Τοποθετήστε το περιεχόμενο του τεστ στο μπάνιο, σε σημείο όπου μπορείτε να προσεγγίσετε εύκολα. Ουρήστε πριν τη χρήση.



- 2.** Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά με ζεστό νερό και σαπούνι, για 20 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Στεγνώστε τα χέρια σας με χάρτινη χειροπετσέτα και χρησιμοποιήστε την ίδια πετσέτα για να κλείσετε τη βρύση.



- 3.** Προετοιμάστε την τουαλέτα. Σηκώστε το κάθισμα της τουαλέτας. Τοποθετήστε την σακούλα συλλογής (β) στο χείλος της λεκάνης της τουαλέτας. Κλείστε το κάθισμα τουαλέτας πάνω στην σακούλα συλλογής. Αυτό θα κρατήσει την σακούλα συλλογής στη θέση της. Βάλτε λίγο χαρτί υγείας στο κάτω μέρος της σακούλας



- 4.** Καθίστε στην τουαλέτα για να κάνετε μία κένωση ως συνήθως. Μην ουρήσετε παράλληλα με την κένωση ή μέσα στην σακούλα συλλογής, απλώς αφήστε τα κόπρανα να περάσουν μέσα στην σακούλα συλλογής



- 5.** Χρησιμοποιώντας τον πλαστικό δοσομετρική από το κύπελλο του δοχείου (α), τοποθετήστε 2 με 3 γεμάτες μεζούρες μέσα σε κάθε κύπελλο - δειγματολήπτη, μέχρι το υγρό να φτάσει στην γραμ-

- ➔ **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΟΥΤΙ** του ΚΙΤ σας για να συσκευάσετε το δείγμα σας και να το στείλετε πίσω.



Χρησιμοποιήστε την επιλογή προπληρωμένης παράδοσης μέσω κούριερ στην περιοχή σας (βρείτε λεπτομέρειες στο I-M-O-N box) & στείλτε το στη διεύθυνση:

ANALYSIS LAB
Τσιμισκή 51, ΤΚ: 54623,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: +30 2310 256388, +30 2310 227089
E-mail: analysisi@analysisi.gr

➔ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

- Μόλις ολοκληρώσετε σωστά την όλη διαδικασία, επικοινωνήστε μαζί μας - ΑΥΣΤΗΡΑ εντός 24ωρου- προκειμένου να στείλουμε το συνεργαζόμενο κούριερ στο μέρος που σας εξυπηρετεί καλύτερα και κατά την ώρα που θα μας υποδείξετε, ώστε να παραλάβει το κουτί με το δείγμα προς εξέταση.

- ➔ **ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ** με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους

E-Mail : info@ismadeofnature.com

Viber : +306934831964

What's up : +306934831964

τα ακόλουθα στοιχεία σας : Όνομα, Διεύθυνση, Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και το μέρος και την ώρα που θα στείλουμε το συνεργαζόμενο κούριερ

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ!!!

Ευχαριστούμε!

I-M-O-N
METHODOS

<https://studio.youtube.com/video/Y1vJm9m9r0/edit>
<https://imonmed.com/services/labtests/>

I-M-O-N METHODOS


EN

Lab Test I-M-O-N KIT


STOOL Sampling Instructions

Content of STOOL Lab test IMON KIT


- 2 specimen collection containers with spoon (a)
- Collection bag (b)
- Biohazard envelope (C)
- Information form (d)
- Packaging box (e)

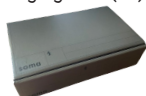

5. Using the plastic spoon from the container cup (a), place 2 to 3 small scoopfuls of stool into each specimen cup, until liquid reaches the fill line. Screw the container's cap tight enough so the liquid remains in the container and doesn't overflow or drip.

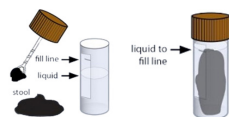

6. Once specimen collection finished, place it into the plastic biohazard envelope (c), and put it into the packaging box (e)

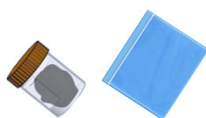

7. Please fill in all the necessary information in the enclosed form (d). Put the form inside the packaging box and return it to the laboratory along with the STOOL specimen container

➔ STEP BY STEP INSTRUCTIONS:

1. Place the content of the test in the bathroom where you can reach them easily. Go for pee prior use.



2. Wash your hands meticulously with warm water and soap, at least 20 seconds. Dry your hands with a paper towel and use that same towel to turn off the faucet.



3. Prepare the toilet. Lift the toilet seat. Place the collection bag (b) on the toilet bowl rim. Close the toilet seat on the collection bag. This will hold the collection bag in place. Put some toilet paper in bottom of bag



4. Sit on the toilet to have a bowel movement (poop) as usual. Don't pee on your stool or in the collection bag, just pass a stool into the bag



➔ **USE THE SMALL BOX** of your KIT to package your Sampling specimens and send it back to our Lab.



ANALYSIS LAB

Tsimiski 51, PC: 54623,

THESSALONIKI, GREECE

Tel: +30 2310 256388, +30 2310 227089

E-mail: analysi@analysi.gr

➔ WAYS OF SENDING YOUR SAMPLING

- As soon as you execute correctly the whole procedure, come in contact with us- STRICTLY within 24h - in order to sent our courier at the time and place best suits you to collect your specimens.

SEND US using one of the following

E-Mail : info@ismadeofnature.com

Viber :+306934831964

What's up : +306934831964

Your : Name, Address, Mobile Phone and also the day and hour best suits you to book an appointment with our courier partner

**BE SURE WE HAVE RECEIVE YOUR
DETAILS BY RESPONDING
TO YOUR MESSAGE**

Thank you!

I-M-O-N METHODOS

<https://studio.youtube.com/video/YIvJm9m9ro0/edit>

<https://imonmed.com/services/labtests/>